

EvapoClean® - Accessoires

ELBOW Stand



Photos non contractuelles

L'accessoire « Elbow Stand » a été conçu pour positionner coudes et béciers verticalement pour éviter de mélanger à nouveau l'échantillon à l'évaporat après l'évaporation ou des acides après le processus de purification.

Il peut être utilisé dans les cas suivants :

- Porter sans risque les échantillons entre l'appareil et la sorbonne,
- De laisser au repos les coudes, avant ou après une expérience.

Nos modèles peuvent être utilisés avec tous nos coudes (125mL / 25mL / 7mL).

Cales en graphite et adaptateur PTFE



Photos non contractuelles

Les cales graphites recouvertes d'un revêtement en PFA et l'adaptateur en PTFE ont été conçus pour les utilisateurs souhaitant purifier des acides dans des contenants plus petits ou plus grands que ceux fournis avec les nos appareils de 25ml, 125ml et 500ml.


Evapo Cleaning kit

Le kit de nettoyage permet de laver la vaisselle utilisée avec votre Evapoclean (25ml, 125ml or 500ml).

Chaque kit inclus :

- 3 réservoirs en PFA (30ml ou 90ml)
- 3 manchons en PTFE à associer à la vaisselle qui doit être lavée.

Principe de fonctionnement

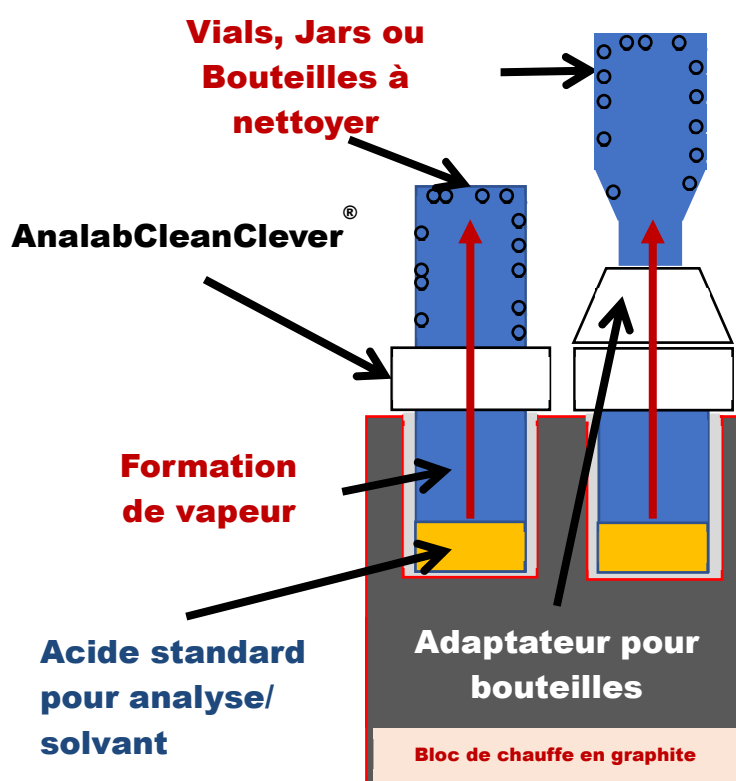

Evapo Cleaning Kit 25ml

3 CleanClever® n°7
3 Vials 30ml

Evapo Cleaning Kit 125ml

3 CleanClever® n°6
3 Jars 90ml

Evapo Cleaning Kit 500ml

3 CleanClever® n°25
3 Jars 90ml